

canine Progesterone VET control kit



For veterinary use only!

Intended use:

For quality control procedures of the quantitative determination with a canine Progesterone VET test kit on a solo or CUBE-VET analyser

 Eurolyser Diagnostica GmbH
Bindergasse 3
5020 Salzburg/Austria

Tel. +43 (0)662 / 43 21 00
Fax +43 (0)662 / 43 21 00-50
www.eurolyser.com

English

	Order information	Indication	Kit size
	Order number: VT0230 Order number: VT0231 Order number: VT2300	canine Progesterone VET test kit canine Progesterone VET test kit canine Progesterone VET control kit	6 tests 16 tests 1 x 2 ml (decision level)



Test kit preparation: Allow single test at least 10 minutes to warm up to room temperature (20 - 25 °C) by placing the test into the test kit rack. Put test kit package back into refrigerator.

Summary

This canine Progesterone VET control kit is a valuable tool for assuring quality and precision of the Progesterone determination with a canine Progesterone VET test kit and provides a reliable marker for monitoring the accuracy of results.

Preparation and Handling

Controls are liquid and ready to use

Stability and Storage

Unopened vials are stable at 2 - 8 °C until the expiration date on the label. Once opened vials are stable for 30 days when stored tightly capped at 2 - 8 °C.

Waste Management

Please refer to local legal requirements

Warnings and Precautions

This control kit is for veterinary diagnostic use only!
DO NOT INGEST! Exercise the normal precautions required for handling all laboratory reagents.

This product contains a substance with animal origin. Hazardous properties cannot be excluded. No dangers expected for the user if used according to directions. Donors have been tested and are found to be clinically healthy. Even though tests on infectious diseases ended negative, this product should be handled as potentially infectious biomaterial.



Set the species to „Control“ before running the QC material



Compare the results with the values indicated in the lot-specific value table




If the result is not within the acceptable range, repeat measurement. If result is again not within the acceptable range, please contact your distributor

Durchführung einer canine Progesterone VET Kontrollmessung


Processing of a canine Progesterone VET control measurement

1.


CUBE-VET SOLO

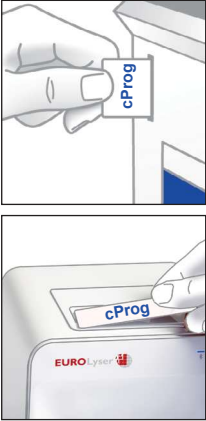

1.1

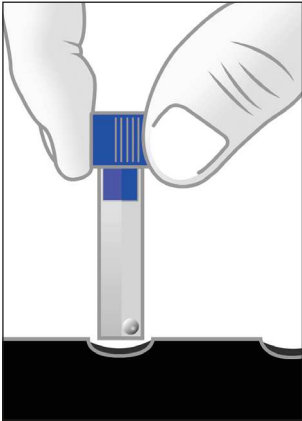

1.2

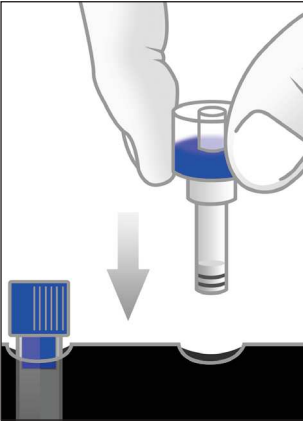

1.3

CUBE-VET SOLO



1.4

2.

CUBE-VET SOLO

Specie:

☒ Control

☐ Dog

☒

☐

Holder:

Species: Control

Sampletype: Control

☒

☐

Sampletype:

☒ Pipette

☐ Pipette5µ

☒

☐

Holder:

Species: Control


Sampletype: Pipette

☒

☐


Pipette

Pipette 5µ

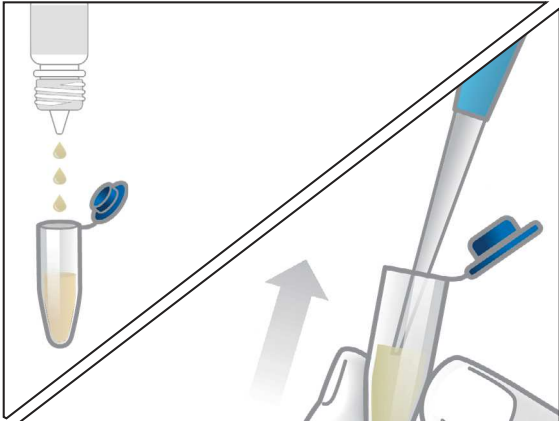


2.3

3.

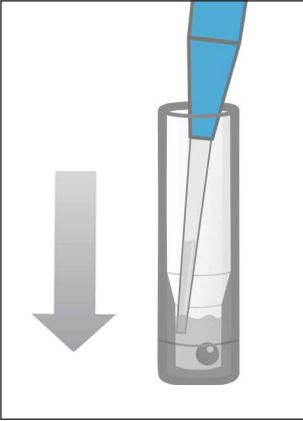

3.1

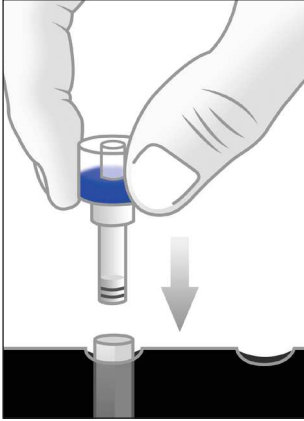

3.2

CUBE-VET SOLO



3.3

Insert Cartridge



3.4

Deutsch

ACHTUNG!

Einzeltest mindestens 10 Minuten vor Gebrauch bei Raumtemperatur (20 - 25 °C) aufwärmen lassen!

1. Testsystem vorbereiten

- 1.1 RFID-Karte platzieren
- 1.2 ERS Küvette in Probenhalter geben
- 1.3 ERS Kappe in Probenhalter geben
- 1.4 „Messung“-Taste drücken, die erforderlichen Daten über den Touchscreen eingeben

2. Vorbereitung der Kontrolle

Für weitere Details beachten Sie bitte das Anwenderhandbuch des Laborphotometers

- 2.1 Als Spezies „Kontrolle“ auswählen
- 2.2 Als Probenart „Pipette“ auswählen
- 2.3 Einige Tropfen Kontrollflüssigkeit in ein Serumcup geben und 40 µl mit Pipette aufsaugen

3. Abarbeitung der Kontrolle

- 3.1 40 µl Kontrollflüssigkeit IN DIE FLÜSSIGKEIT in der ERS Küvette geben
- 3.2 ERS Kappe fest auf ERS Küvette setzen
- 3.3 ERS Cartridge in Laborphotometer einsetzen.
- 3.4 Automatische Abarbeitung der Kontrolle durch Drücken des  Start Buttons am solo Laborphotometer, bzw. durch Schließen der Türe am CUBE-VET Laborphotometer.

English

ATTENTION!

Allow single test at least 10 minutes to warm up to room temperature (20 - 25 °C) before use!

1. Preparation of test system

- 1.1 Place RFID card
- 1.2 Place ERS cuvette in test kit rack
- 1.3 Place ERS cap in test kit rack
- 1.4 Press „Measurement“ button, enter required information using the touchscreen

2. Control preparation

For further details please see user manual of laboratory photometer

- 2.1 Set species to „Control“
- 2.2 Set sampletype to „Pipette“
- 2.3 Dispense some drops of control liquid into serum cup and aspirate 40 µl using the pipette

3. Control processing

- 3.1 Dispense 40 µl control liquid INTO THE LIQUID in the ERS cuvette
- 3.2 Apply ERS cap firmly onto ERS cuvette
- 3.3 Place ERS cartridge into laboratory photometer
- 3.4 Start automatic control processing by pressing the  start button on the solo laboratory photometer, or by closing the door of the CUBE-VET laboratory photometer.

Wertetabelle für das canine Progesterone VET Control Kit Value sheet for the canine Progesterone VET control kit

LOT

2506-1



2026-03

Kontrollwerte | Control Values

Target	value (min.)	value (max.)
4.4 ng/ml	2.6 ng/ml	6.2 ng/ml
14.0 nmol/l	8.4 nmol/l	19.6 nmol/l

Technical details subject to change without notice.

Doc-ID: e960e100-9772-4327-82a5-c30563db0a3b ; latest revision: DP 5.0 ; date of print: 2019-10-14

canine Progesterone VET Control Kit

Nur für den Veterinärgebrauch!

Verwendungszweck:

Für Verfahren zur Qualitätskontrolle der quantitativen Bestimmung mit einem canine Progesterone VET Testkit am solo oder CUBE-VET Analyser.



Eurolyser Diagnostica GmbH
Bindergasse 3
5020 Salzburg/Austria

Tel. +43 (0)662 / 43 21 00
Fax +43 (0)662 / 43 21 00-50
www.eurolyser.com

Deutsch

Bestellinformation	Bezeichnung	Packungsgröße
 Bestellnummer: VT0230 Bestellnummer: VT0231 Bestellnummer: VT2300	canine Progesterone VET Testkit canine Progesterone VET Testkit canine Progesterone VET Control Kit	6 Tests 16 Tests 1 x 2 ml (decision level)



Vorbereitung des Testkits: Der Einzeltest muss min. 10 Minuten auf Raumtemperatur (20 - 25 °C) aufgewärmt werden. Geben Sie dazu den Test aus der Packung und setzen Sie ihn in das Testkit-Rack. Geben Sie die Testpackung zurück in den Kühlschrank.

Zusammenfassung

Die Verwendung dieses canine Progesterone VET Control Kits dient der verlässlichen Erhebung der Qualität und Präzision der Progesteronbestimmung mit einem canine Progesterone VET Testkit und ermöglicht daher die Überwachung der Genauigkeit der Testergebnisse.

Vorbereitung und Handhabung

Die Kontrollen sind flüssig und gebrauchsfertig.

Stabilität und Lagerung

Ungeöffnete Fläschchen sind bei 2 - 8 °C stabil bis zum am Label angegebenen Haltbarkeitsdatum. Nach dem Öffnen sind die Kontrollen für 30 Tage stabil, wenn bei 2 - 8 °C gut verschlossen gelagert.

Entsorgung

Bitte beachten Sie immer die lokalen gesetzlichen Vorschriften.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

Dieses Control Kit ist nur für den veterinären Einsatz!
NICHT VERSCHLUCKEN! Beachten Sie die üblichen Laborvorschriften beim Umgang mit Reagenzien.

Dieses Produkt enthält eine Substanz tierischen Ursprungs. Gefährliche Eigenschaften können nicht ausgeschlossen werden. Allerdings ist von keinen Gefahren auszugehen, sofern die Auflagen der Gebrauchsanweisung beachtet werden. Die Spender wurden untersucht und für medizinisch gesund befunden. Obwohl keine ansteckenden Krankheiten nachgewiesen wurden, sollte dieses Produkt als potentiell ansteckendes Biomaterial gehandhabt werden.



Spezies auf „Kontrolle“ stellen, bevor das Kontrollmaterial gemessen wird



Vergleichen Sie die Ergebnisse der Kontrollmessung mit den auf der lot-spezifischen Tabelle angeführten Grenzwerten



Befindet sich das Ergebnis außerhalb der Zielbereiche, wiederholen Sie die Messung. Ist das Ergebnis dann immer noch außerhalb der Zielbereiche, wenden Sie sich bitte an Ihren Distributor.